

### **Уважаемый покупатель!**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

### **Гарантийные обязательства.**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.

## **ООО «Горское»**


127055, г. Москва, Порядковый пер., д.19, стр.2, оф. 23

Тел: (495) 223-26-52

## **Паспорт**

### **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРЕСЛА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО КГУ-01 VLANA**

### **Инструментальный столик**

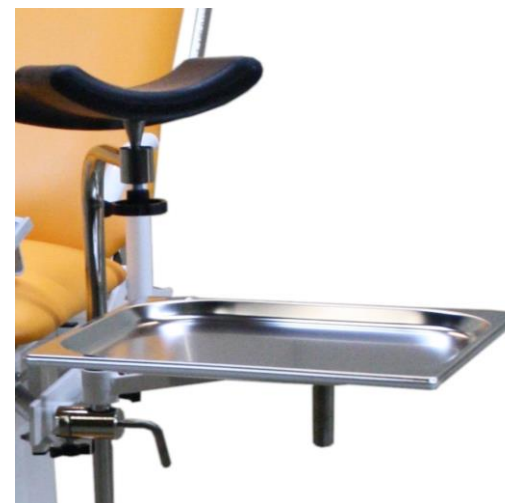

2018г

### Назначение изделия:

используется в комплекте к креслу гинекологическому универсальному КГУ-01 VLANA для размещения инструментов, лекарственных препаратов и пр.

### Технические характеристики:

Инструментальный столик изготовлен из кислотоустойчивой нержавеющей стали Т-0,5 мм, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. Кронштейн крепления поворотный изготовлен из стальных труб с полимерным порошковым покрытием. Поддон столика съемный. Столик регулируется по высоте и перемещается по горизонтали. В заданном положении фиксируется при помощи винта-фиксатора. Столик крепится к держателю (стойке) подколенного упора через направляющую втулку и фиксатора с любой стороны кресла.

### Габаритные размеры, мм:

длина – 355мм

Ширина – 325мм

Высота – 120мм

### Размеры съемного поддона, мм:

длина – 355мм

Ширина – 325мм

Высота – 20мм

### Комплектация:

Поддон столика из нержавеющей стали – 1 шт.;

Кронштейн крепления с рамкой для поддона- 1 шт.;

Фиксатор – 2 шт.

Масса (с упаковкой), кг – 2,0кг

### Характеристики для транспортировки:

Объем, м. куб. – 0,014

Поставляется в собранном виде, кол-во мест – 1 .

Срок службы – 6 лет.

### Правила

#### хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка инструментального столика на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

-температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20° до +40°С.

2. Изделие может храниться только в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

-температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0° до +40°С.

- относительная влажность при температуре окружающей среды +25° не более 80%

-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

Дата производства

Штамп производителя

Дата продажи