

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:


Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 2/04
(на опорах)

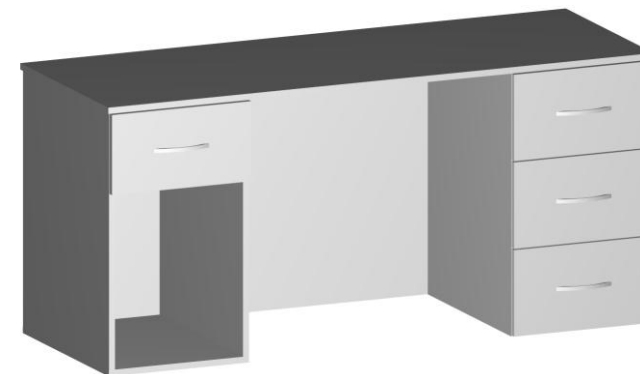

РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей.
- 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, м			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
750	1500	600	70

3. Комплект поставкистола на опорах.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница (1500х600)	1
2	Стенка боковая (644*520)	4
3	Дно тумбы(520*360)	2
4	Фасад ящика (216*358)	4
5	Задняя стенка (1480*660)	1
6	Задняя панель ящика (270*150)	4
8	Направляющие L 400 комп.	1
10	Опоры	8
11	Ручка	4
13	Направляющие L 450, комплект	4
14	Винт М4х35	8
15	Евровинт	32
16	Заглушка	8
17	Эксцентриксовая стяжка	8
18	Саморез 3,5*16	72
19	Ключ винтовой стяжки	1
20	Боковая стенка ящика (450*100)	8
21	Дно ящика ДВПО (448*300)	4
23	Гвозди 1*15	40
24	Шуруп 4*30	8
25	Полка под клавиатуру (734*400)	1
26	Паспорт	1
27	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект). 4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Собираем правую тумбу. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду.

Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 20 с задней стенкой и фасадом 4.

Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 23 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 21.

Собираем левую тумбу. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3 и панелью ниши 7.

4.3. При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 с тумбами. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 8 к боковым стенкам тумб для установки полки под клавиатуру (при комплектации с полкой под клавиатуру)

4.4. Вернуть ножки эксцентриксовых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриксовыми стяжками 17.

4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас стола на ровную поверхность столешницей вниз.

При помощи саморезов 18 установить опоры 10 на дно тумб.

4.6. Поставить стол в исходное положение. При помощи винта 14 закрепить ручки 11 на фасады ящиков 4. Установить ящики по месту и при необходимости отрегулировать фасады регулировкой направляющих. Установить полку под клавиатуру.

4.7. Установить заглушки эксцентриксовых 17 и винтовых 15 стяжек.

